

Produtos:

PMMA Mono, PMMA Multi, Clear e Gum para sistema CAD/CAM.

Composição:

- Polimetacrilato
- EGDMA
- Pigmentos Biocompatíveis
- Fluorescente

Indicações:

O material restaurador pode ser fresado em sistemas de CAD/CAM que possuem estratégia de usinagem em blocos e discos de PMMA. As restaurações são cimentadas à estrutura do dente após condicionamento ácido, aplicação de adesivo odontológico e cimento resinoso odontológico. As etapas de confecção dos sistemas CAD/CAM são descritas nas instruções de uso e nos manuais de cada fabricante. As recomendações do fabricante devem ser seguidas.

Cores disponíveis:

PMMA: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3 e BL4.



Calcinável: Clear, Red, Pink, Rubi, Azul, Limão, Flamingo e Lilás.

Gum: Rosa Black, Rosa Escuro e Rosa Médio B.

Modelos disponíveis: 71, 95 e 98mm.

Instruções de Uso:

Deve ser utilizado na técnica de usinagem para confecção de coroas e pontes; inlay, onlay ou facetas, como provisórios de longa duração, cimentados ou parafusados; padrões de fundição e injeção de cerâmica (Burnout) e base de próteses (Gum) usinados por Sistema CAM de diversos fabricantes.

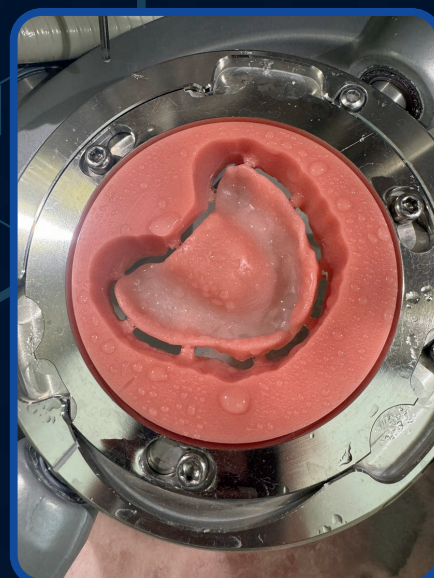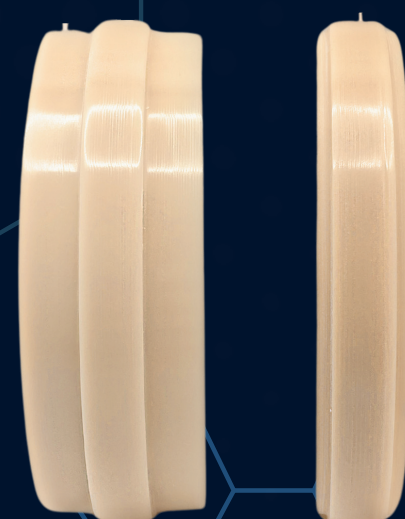

1. Fixe o bloco na máquina seguindo as instruções do fabricante do equipamento.
2. Na utilização do bloco multicolor, a variação de cor no elemento é dada pelo posicionamento da peça de acordo com as camadas horizontais de cores do Bloco.
3. Consulte a disponibilidade de alteração do posicionamento vertical no software e CAM utilizado.
4. Após a usinagem retire o bloco do equipamento e remova o elemento do bloco.
5. Para acabamento do trabalho confeccionado, utilize fresas, lixas e borrachas. Para o polimento e brilho, utilize pasta de acabamento.

Segurança:

Uso somente por profissionais da área odontológica capacitados em operar sistemas CAD/CAM.

- Evitar superaquecimento durante usinagem e acabamento.
- A poeira criada durante a usinagem pode causar irritação aos olhos, pele e vias respiratórias.
- Recomenda-se uso de equipamento de proteção pessoal (máscara, óculos).
- A estrutura deve ser limpa e desinfetada antes de ser colocada na boca do paciente.
- Conservar ao abrigo de luz e calor.
- Somente para uso odontológico.

Precauções:

Conservar ao abrigo de luz e calor.
Somente para uso odontológico.

Prazo de validade:

10 anos a partir da data de fabricação.

Registro Anvisa nº: 81954689001

Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira CRQ-IV: 04366291.

